



BRUKSANVISNING

Syftet med det här häftet är att informera användare av Bausch + Lomb daily disposable hydrofila mjuka kontaktlinser om hur man bär och sköter sina linser.

Det gäller:

| PRODUKTNAMN | MATERIAL | VATTENINNEHÅLL | FÖRPACKNINGS-LÖSNING |
|---|--------------|----------------|---|
| SofLens® daily disposable (hilafilcon B) Hanteringsfärgade kontaktlinser för daglig användning | Hilafilcon B | 59 % av vikten | Boratbuffrad koksaltlösning med poloxamin |
| SofLens® daily disposable Toric (hilafilcon B) Hanteringsfärgade kontaktlinser för daglig användning | | | |
| Naturelle™ daily disposable (hilafilcon B) Kosmetisk färgade kontaktlinser för daglig användning | | | |
| Biotrue® ONEday (nesofilcon A) Hanteringsfärgade kontaktlinser för daglig användning | Nesofilcon A | 78 % av vikten | Boratbuffrad koksaltlösning med poloxamin |
| Biotrue® ONEday for Presbyopia (nesofilcon A) Hanteringsfärgade kontaktlinser för daglig användning | | | |

Indikation

Bausch + Lomb (hilafilcon B och nesofilcon A) kontaktlinser är avsedda för daglig användning för korrigerande av refraktiv ametropi (myopi, hyperopi, astigmatism), presbyopi och minskad sfärisk aberration hos afaka och/eller icke-afaka personer med friska ögon som uppvisar refraktiv astigmatism på upp till 2,00 dioptrier eller mindre (för SofLens® daily disposable Toric 5,00 dioptrier eller mindre) som inte stör synskärpan. Linsen ordinerar för engångsbruk i sfärisk styrka mellan +20,00 D och -20,00 D och ska kasseras efter varje användning.

Beskrivning och bruk

Linserna är avsedda för dagligt engångsbruk och ska kasseras efter varje användningsperiod. Återanvändning utan att linserna rengörs och desinficeras kan leda till infektion och/eller allvarlig ögonskada. Följ alltid optikers rekommenderade schema för användning.



Linserna levereras sterila och är enligt tillverkaren avsedda att användas under en period på högst en dag. De har ångsteriliserats.

ANVÄND INTE produkten om förpackningen är skadad eller öppnad.

Anvisningar för insättning och borttagning

Innan du hanterar linserna, tvätta och torka alltid händerna ordentligt och undvik tvål med läkemedel eller parfym. Håll ut linsen i handflatan. Se till att linsen är vänd åt rätt håll.



Kontrollera linsen innan du sätter in den och använd den inte om den är repad eller skadad.

Ta bort linsen med rena och torra händer genom att med ett finger dra ned linsen till ögonvitan och sedan avlägsna den. Använd återfuktningsdroppar om linsen är svår att avlägsna. Bortskaffa alltid linsen efter att den har avlägsnats från ögat.

Underhåll av dina linser

- Tvätta och skölj alltid händerna innan du hanterar linserna.
- Låt ingen kosmetika, lotion, tvål, kräm eller parfymrat ämne komma in i ögat eller på linserna.
- Använd aldrig vassa föremål eller naglar till att avlägsna linserna från sina behållare eller dina ögon.
- Bortskaffa alltid linserna efter att de har avlägsnats.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Om du inte följer din optikers rekommenderade schema för användning och rengöring kan det leda till en större risk för allvarliga ögoninfektioner.

Använd inte engångslinserna för dagligt bruk under mer än en dag och inte när du sover.

Använd inte kontaktlinser om du har:

- Allergi, inflammation, infektion eller rodnad i eller runt ögat
- Torra ögon (otillräcklig mängd tårvätska)
- Nedsatt hälsa som påverkar ögonen, t.ex. förkylning eller influensa
- En systemisk sjukdom som påverkar ögonen

Kontakta din optiker innan du använder kontaktlinser i följande fall:

- Om du deltar i vattensporter
- I extremt torra eller dammiga miljöer
- Om du använder ögonmedicin

Avlägsna dina linser omedelbart om något av följande problem uppstår:

- Det sticker, bränner, kliar eller gör ont i ögonen eller ögonen känns irriterade
- Nedsatt komfort jämfört med tidigare användning
- Ovanlig utsöndring eller rikligt tårflöde
- Röda ögon
- Allvarligt eller ihållande torra ögon
- Nedsatt eller dimmig syn
- Regnbågar eller ljusgloria runt ljus
- Ljuskänslighet

Om något av dessa symptom fortsätter efter att en lins tagits ut och en ny lins har satts in, avlägsna linsen och kontakta din optiker. Dessa symptom kan leda till mer allvarliga tillstånd om de ignoreras.

Ytterligare varningar och försiktighetsåtgärder för Biotrue ONEday (nesofilcon A) kontaktlins

Varning: UV-absorberande kontaktlinser ersätter inte skyddande UV-absorberande glasögon, såsom UV-absorberande skyddsglasögon eller solglasögon, eftersom de inte helt täcker ögat och det omgivande området. Du bör fortsätta att använda UV-absorberande glasögon enligt anvisningarna.

Obs! Långvarig exponering för UV-strålning är en av de riskfaktorer som förknippas med grå starr. Exponeringen bygger på ett antal faktorer såsom miljöförhållanden (höjd, geografi, molnighet) och personliga faktorer (omfattning och typ av utomhusaktiviteter). UV-blockerande kontaktlinser bidrar till att ge skydd mot skadlig UV-strålning.

Obs! Hur effektivt det är att bära UV-absorberande kontaktlinser för att förebygga eller minska förekomsten av okulära problem som är kopplade till exponering för UV-ljus har ännu inte fastställts. Kliniska studier för att bevisa att användningen av UV-blockerande kontaktlinser minskar risken för grå starr eller andra ögonproblem har dock inte utförts. Be din optiker om mer information.

Följande symboler finns på etiketter och förpackningar



Avgift betald för avfallshantering enligt 94/62/EG



Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609 USA



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames, KT2 6TN, UK

Datum för utfärdande: 2014-10-06



Anger CE-märkningen och det anmälda organets nummer



Får ej återanvändas



Temperaturbegränsning



KÄYTTÖOHJEET

Tämän lehtisen tarkoitus on näyttää, miten Bausch + Lomb daily disposable hydrofiilisiä pehmeitä piilolinsssejä käytetään ja hoidetaan.

Se koskee:

| TUOTTEEN NIMI | MATERIAALI | VESIPITOISUUS | PAKKAUSLIUOS |
|--|--------------|---------------|---|
| SofLens® daily disposable (hilafilcon B) Käsittelyvärjätetyt piilolinssit päiväkäyttöön | Hilafilcon B | 59 % painosta | Boraattipuskuroitu suolaliuos, jossa on poloksamiinia |
| SofLens® daily disposable Toric (hilafilcon B) Käsittelyvärjätetyt piilolinssit päiväkäyttöön | | | |
| Naturelle™ daily disposable (hilafilcon B) Kosmeettisesti värjätetyt piilolinssit päiväkäyttöön | | | |
| Biotrue® ONEday (nesofilcon A) Käsittelyvärjätetyt piilolinssit päiväkäyttöön | Nesofilcon A | 78 % painosta | Boraattipuskuroitu suolaliuos, jossa on poloksamiinia |
| Biotrue® ONEday for Presbyopia (nesofilcon A) Käsittelyvärjätetyt piilolinssit päiväkäyttöön | | | |

Käyttöaiheet

Bausch + Lomb (hilafilcon B ja nesofilcon A) piilolinssit on tarkoitettu päivittäiseen käyttöön korjaamaan silmän taittovirheitä (likitaiteisuutta, kaukotaitoisuutta ja hajataiteisuutta) ja ikänäköä. Ne on tarkoitettu myös vähentämään näöntarkkuutta häiritsemätöntä sfääristä aberratiota terveysilmäisillä afakia- tai ei-afakiapotilailla, joiden hajataiteisuus on enintään 2,00 dioptriaa (SofLens® Daily Disposable Toricilla enintään 5,00 dioptriaa). Linssit määrätään kertakäyttöön voimakkuuksilla, jotka ovat +20,00 D:n ja -20,00 D:n välillä, ja ne tulee hävittää jokaisen käyttökerran jälkeen.

Kuvaus ja käyttösovellus

Nämä linssit on tarkoitettu päivittäiseen kertakäyttöön ja ne tulee hävittää jokaisen käyttöjaksun jälkeen. Uudelleen käyttö ilman linssien puhdistusta ja desinfiointia voi aiheuttaa tulehduksen ja/tai vakavan silmävaurion. Noudata aina optikon tai silmälääkärin suosittelemia pitoaikoja.



Nämä linssit toimitetaan steriileinä ja niiden valmistaja on tarkoittanut niiden enimmäiskäyttöajaksi korkeintaan yhden päivän. Ne on höyrysteriloitu.

EI SAA KÄYTTÄÄ, mikäli pakkaus ei ole avaamaton ja ehjä.

Asetus- ja poisto-ohjeet

Pese ja kuivaa aina kädet perusteellisesti ennen linssien käsittelemistä, vältä hajustettuja saippuota ja lääkesaippuota. Kaada linssi kämmenellesi. Varmista, että linssi on oikein päin.



Tarkista linssi ennen silmään laittamista, äläkä laita sitä, jos siinä on naarmuja tai vaurioita.

Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat, kun poistat linssin. Liu'uta sormellasi linssi alas silmän valkoiseen osaan ja poista se. Käytä kostutustippoja, jos linssin poistaminen on vaikeaa. Hävitä linssi aina silmästä poistamisen jälkeen.

Linssien hoito

- Pese ja huuhtelee aina kädet ennen linssien käsittelemistä
- Älä päästä kosmeettisia aineita, voiteita, saippuaa, rasvoja tai hajustettuja aineita silmiin tai linssiin
- Älä koskaan käytä teräviä esineitä tai kynsiä poistaessasi linssesi kotelostaan tai silmistäsi
- Hävitä linssit aina poistamisen jälkeen

Varoitukset ja varoitoimet

Ellei optikon tai silmälääkärin suosittelemia pitoaikoja ja puhdistusmenetelmiä noudateta, voi vakavien silmätulehduksien riski kasvaa huomattavasti.

Älä käytä päivittäiseen kertakäyttöön tarkoitettuja linssesi pidempään kuin yhden päivän äläkä nukkuessasi.

Älä käytä piilolinssesiä, jos sinulla on:

- Allergioita, tulehduksia, infektoita tai punaisuutta silmässä tai sen ympärillä
- Kuivat silmät (riittämätön kyynelneeste)
- Huono terveystila, joka vaikuttaa silmiin, esim. kylmettyminen tai flunssa
- Elimistöön vaikuttava sairaus, joka vaikuttaa myös silmiin

Kysy optikoltasi tai silmälääkäriltäsi, ennen kuin käytät piilolinssesiä, kun:

- Harrastat vesiturheilua
- Oleskelet erityisen kuivissa tai pölyisissä olosuhteissa
- Käytät silmälääkkeitä

Ota linssit heti pois, jos sinulla on jokin seuraavista:

- Silmien pistelyä, polttelua, kutinaa, ärsytystä tai muuta kipua silmässä
- Käyttö on epämukavampaa kuin edellisellä kerralla
- Epätavallisia silmän eritteitä tai runsasta kyynelneesteen eritystä
- Silmien punaisuutta
- Vakavaa tai pysyvää silmien kuivumista
- Heikentynyt tai sumentunut näkö
- Sateenkaaria tai haloja valojen ympärillä
- Valoherkkyyttä

Jos mikä tahansa näistä oireista jatkuu sen jälkeen, kun olet poistanut linssin ja vaihtanut sen uuteen, ota linssi pois ja ota yhteys optikkoon tai silmälääkäriin. Nämä oireet voivat johtaa vakavampiin seurauksiin, jos niistä ei välitetä.

Biotrue ONEday (nesofilcon A) piilolinssesiä koskevat muut varoitukset ja varoitoimenpiteet

Varoitus: UV-säteilyltä suojaavat piilolinssit eivät korvaa UV-säteilyltä suojaavia lasia tai aurinkolaseja, koska ne eivät peitä silmää ja ympäröivää aluetta täysin. Sinun täytyy jatkaa UV-suojaavien lasien käyttöä ohjeiden mukaan.

Huomautus: Pitkäkestoinen altistus UV-säteilylle on eräs kaihisairauksien riskitekijöistä. Altistus perustuu lukuisiin tekijöihin, kuten ympäristöolosuhteisiin (korkeus, maan pinnanmuodot, pilvipeite) ja henkilökohtaisiin tekijöihin (ulkoaktiiviteettien laajuus ja luonne). UV-suojaavat piilolinssit auttavat suojaamaan silmiä haitalliselta UV-säteilyltä.

Huomautus: UV-säteilyltä suojaavien piilolinssien käytön tehokkuutta UV-altistukseen liittyvien silmänsairauksien ilmaantuvuuden estämiseksi tai vähentämiseksi ei ole varmistettu. Ei myöskään ole tehty kliinisiä tutkimuksia, jotka osoittaisivat, että UV-suojaavien piilolinssien käyttäminen vähentää kaihin tai muiden silmänsairauksien kehittymisen riskiä. Pyydä lisätietoja optikolta tai silmälääkäriltä.

Etikettien ja pakkausten symbolien opas



Direktiivin 94/62/EY mukainen pakkausjättemaksu maksettu



Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609 USA



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Julkaisupäivämäärä: 2014-10-06



EY:n vaatimusten mukaisuutta osoittava CE-merkki ja ilmoitetun tarkastuslaitoksen numero



Vain kertakäyttöinen



Lämpötilarajoitus

®/™ ovat Bausch & Lomb Incorporatedin tai sen tytäryritysten tavaramerkkejä.

© Bausch & Lomb Incorporated

BAUSCH + LOMB DAILY DISPOSABLE ENGANGLINSE FOR DAGLIG BRUK

NO



BRUKSANVISNING

Denne brosjyren informerer brukere av Bausch + Lomb daily disposable hydrofile myke engangslinser til daglig bruk om hvordan linsene skal brukes og håndteres.

Brosjyren gjelder:

| PRODUKTNAVN | MATERIALE | VANNINNHOOLD | EMBALLASJELØSNING |
|--|--------------|----------------|------------------------------------|
| SofLens® daily disposable (hilafilcon B) Håndteringsfargede kontaktlinser til daglig bruk | Hilafilcon B | 59 % av vekten | Boratbufret saltvann med poloxamin |
| SofLens® daily disposable Toric (hilafilcon B) Håndteringsfargede kontaktlinser til daglig bruk | | | |
| Naturelle™ daily disposable (hilafilcon B) Kosmetisk fargede engangslinser til daglig bruk | | | |
| Biotrue® ONEday (nesofilcon A) Håndteringsfargede kontaktlinser til daglig bruk | Nesofilcon A | 78 % av vekten | Boratbufret saltvann med poloxamin |
| Biotrue® ONEday for Presbyopia (nesofilcon A) Håndteringsfargede kontaktlinser til daglig bruk | | | |

Indikasjon:

Bausch + Lomb (hilafilcon B og nesofilcon A) kontaktlinser er indisert til daglig korreksjon av refraktiv ametropi (myopi, hyperopi, astigmatisme), presbyopi og reduksjon av sfærisk aberrasjon hos personer med eller uten afaksi som har friske øyne som viser tegn til refraktiv astigmatisme opptil 2,00 dioptrier eller mindre (SofLens® daily disposable Toric har 5,00 dioptrier eller mindre). Linsen påvirker ikke synsskarpheten. Linsen skal forskrives som engangslinse i sfæriske styrker fra +20,00D til -20,00D, og den skal kastes etter fjerning.

Beskrivelse og bruk


Linsene er ment til daglig bruk og skal kastes etter bruk. Gjenbruk uten forutgående rengjøring og desinfisering kan gi infeksjon og/eller alvorlig øyeskade. Følg alltid din optikers anbefalte bruksplan.



Linsene er sterile og er ment for bruk i maksimalt én dag. Linsene er dampsterilisert. Dersom emballasjen er skadet eller åpnet, SKAL IKKE linsene brukes.

Instruksjoner for innsetting og fjerning

Før du tar i linser, skal du alltid vaske og tørke hendene grundig og unngå parfymerte eller medisinske såper. Legg linsen i håndflaten. Kontroller at linsen vender riktig vei.

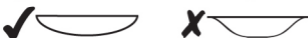

Inspiser linsen før du setter den inn. Ikke sett den inn dersom den har riper eller er skadet.

Før du fjerner linsen, skal du påse at hendene dine er rene og tørre. Bruk fingeren til å skyve linsen ned til det hvite i øyet og fjern den. Bruk øyedråper (fuktighetsdråper) dersom det er vanskelig å fjerne linsen. Kast alltid linsen etter at den er fjernet fra øyet.

Håndtering av linsene dine

- Du må alltid vaske og skylle hendene før du tar i linsene
- Ikke la kosmetiske produkter, kremer, såper eller parfymerte substanser komme inn på øynene eller linsene
- Bruk aldri skarpe gjenstander eller neglene for å fjerne linsene fra beholderne eller øynene
- Kast alltid linsene etter bruk

Advarsler og forsiktighetsregler

Dersom du ikke følger din optikers anbefalte bruksplan og rengjøringsråd, kan dette øke risikoen for alvorlige øyeinfeksjoner.

Bruk ikke engangslinser mer enn én dag eller mens du sover.

Bruk ikke kontaktlinser dersom du har:

- allergi, betennelse, infeksjon eller rødhet i og rundt øyet
- tørre øyne (lav tårevæskeproduksjon)
- sykdom som innvirker på øynene, f.eks. forkjølelse eller influensa
- systemiske sykdommer som innvirker på øynene

Kontakt optikeren din før du tar i bruk kontaktlinser når du

- driver vannsport
- oppholder deg i svært tørre eller støvfyllte omgivelser
- bruker øyemedisin

Dersom du opplever noen av følgende problemer, skal du straks fjerne linsene:

- stikking i øynene, brennende følelse, kløe, irritasjon eller annen smerte
- mindre komfort enn ved tidligere bruk
- unormal sekresjon eller rennende øyne
- røde øyne
- svært tørre øyne / konstant tørre øyne
- redusert eller uskarpt syn
- regnbuer eller lysrefleks rundt lys
- lysfølsomhet

Dersom noen av disse symptomene vedvarer etter at en linse er fjernet og en ny er satt inn, skal du fjerne linsen og kontakte optikeren din. Symptomene kan føre til alvorlige tilstander dersom de ignoreres.

Ytterligere advarsler og forsiktighetsregler for Biotrue ONEday (nesofilcon A) kontaktlinse

Advarsel: UV-absorberende kontaktlinser erstatter IKKE UV-absorberende vernebriller eller solbriller, da de ikke dekker øynene og området rundt øynene helt. Du skal fortsette å bruke UV-absorberende briller som anvist.

Merk: Langvarig eksponering for UV-stråling er en av risikofaktorene som er forbundet med grå stær. Eksponeringen er basert på en rekke faktorer, som f.eks. miljømessige forhold (høyde over havet, geografi, skydekke) og personlige faktorer (omfang og type utendørsaktiviteter). UV-blokkerende kontaktlinser beskytter mot skadelig UV-stråling.

Merk: Nyten av å bruke UV-absorberende kontaktlinser som forebygging eller reduksjon av forekomsten av øyelidelser knyttet til eksponering for UV-stråler, er ennå ikke kartlagt. Det er ikke gjennomført kliniske studier for å fastslå at bruk av UV-blokkerende kontaktlinser reduserer risikoen for å utvikle grå stær eller andre øyelidelser. Rådfør deg med optikeren din for å få mer informasjon.

Referanseguide for symboletiketter og esker



Avgift for avfallshåndtering i henhold til 94/62/EF



Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609 USA



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Dato utstedt: 2014-10-06



Indikerer CE-konformitet og nummer på informert instans



Må ikke brukes på nytt



Temperaturbegrensning

* /™ er varemerker som tilhører Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated



BRUGSANVISNING

Denne brochure har til hensigt at informere brugere af Bausch + Lomb daily disposable hydrofile bløde kontaktlinser om, hvordan de skal bruge og pleje deres linser.

Den gælder for:

| PRODUKTNAVN | MATERIALE | VANDINDHOLD | PAKKENS VÆSKE |
|--|--------------|-----------------|--------------------------------------|
| SofLens® daily disposable (hilafilcon B) Håndteringsfarvede kontaktlinser til daglig brug | Hilafilcon B | 59 % efter vægt | Boratbufferet saltvand med poloxamin |
| SofLens® daily disposable Toric (hilafilcon B) Håndteringsfarvede kontaktlinser til daglig brug | | | |
| Naturelle™ daily disposable (hilafilcon B) Kosmetisk farvede kontaktlinser til daglig brug | | | |
| Biotrue® ONEday (nesofilcon A) Håndteringsfarvede kontaktlinser til daglig brug | Nesofilcon A | 78 % efter vægt | Boratbufferet saltvand med poloxamin |
| Biotrue® ONEday for Presbyopia (nesofilcon A) Håndteringsfarvede kontaktlinser til daglig brug | | | |

Indikation

Bausch + Lomb (hilafilcon B og nesofilcon A) kontaktlinser er endagslinser til korrigerende af refraktiv ametropi (myopi, hypermetropi, astigmatisme), presbyopi og reduktion af sfærisk aberration hos afake og/eller ikke-afake personer med raske øjne, som har en refraktiv astigmatisme på 2,00 dioptrier eller mindre (for SofLens® daily disposable Toric, 5,00 dioptrier eller mindre), som ikke forringer synsstyrken. Linsen ordineres til engangsbrug i sfæriske styrker fra + 20,00 D til -20,00 D og skal kasseres efter brug.

Beskrivelse og anvendelse

Linserne er beregnet til daglig engangsbrug og skal kasseres, når de er blevet brugt. Hvis de anvendes igen uden at være rensede og desinficeret, kan det føre til infektion og/eller alvorlige øjenssygdomme. Følg altid din øjenspecialists anvisninger.



Linserne leveres sterile og er fra producentens side beregnet til at blive brugt maksimalt én dag. Linserne er dampsteriliserede.

Anvend IKKE linserne, hvis pakken har været åbnet eller er beskadiget.

Instruktioner om isættelse og fjernelse

Før linserne håndteres, skal du altid vaske og tørre hænderne grundigt og undgå sæber med parfume eller medicin. Hæld linsen ned i din håndflade. Sørg for, at linsen vender rigtigt.



Kontroller linsen, før du sætter den i øjet. Sæt ikke linsen i øjet, hvis den er ridset eller beskadiget.

Før du fjerner linsen, skal du sørge for, at dine hænder er rene og tørre. Brug fingeren til at skubbe linsen ned til øjets hvide del, hvor du så kan fjerne den. Anvend fugtdråber, hvis det er vanskeligt at fjerne linsen. Kassér altid linsen, når du har fjernet den fra øjet.

Pleje af dine linser

- Vask altid hænder og skyl dem, før du håndterer dine linser
- Der må ikke komme kosmetik, lotion, sæbe, creme eller parfume i øjnene eller på linserne
- Du må aldrig anvende skarpe genstande eller fingernegle til at fjerne linserne fra beholderen eller fra øjnene
- Linserne skal altid kasseres, når de er blevet fjernet fra øjet

Forholdsregler og advarsler

Hvis du ikke følger din øjenspecialists anvisninger for brug og rensning, kan det føre til større risiko for alvorlige øjeninfektioner.

Kontaktlinser til daglig engangsbrug må ikke anvendes mere end én dag og må ikke anvendes når du sover.

Anvend ikke kontaktlinser, hvis du lider af følgende:

- Allergi, betændelse, infektion eller rødme i eller omkring øjnene
- Tørre øjne (utilstrækkelig tårevæske)
- Dårligt helbred, der påvirker øjnene (f.eks. forkølelse og influenza)
- Enhver systemisk lidelse, der påvirker øjnene

Kontakt din øjenspecialist, før du begynder at bruge kontaktlinser:

- Hvis du skal dyrke vandsport
- Hvis du er i meget tørre eller støvede omgivelser
- Hvis du bruger øjenmedicin

Hvis du oplever et af følgende problemer, skal du omgående tage din linser ud:

- Hvis øjnene prikker, brænder, klør eller er irriterede, eller hvis du har andre øjensmerter
- Hvis du føler ubehag sammenlignet med tidligere brug
- Hvis der kommer sekret eller meget vand ud af øjnene
- Hvis øjnene er røde
- Hvis øjnene er meget tørre eller er tørre hele tiden
- Hvis du oplever reduceret eller sløret syn
- Hvis du oplever regnbuer eller haloer omkring lys
- Hvis du bliver følsom over for lys

Hvis et af disse symptomer fortsætter, efter du har fjernet de gamle linser og sat nye i, skal du fjerne linserne og kontakte din øjenspecialist. Disse symptomer kan føre til mere alvorlige sygdomme, hvis de ignoreres.

Yderligere advarsler og forholdsregler for Biotrue ONEday kontaktlinser (nesofilcon A)

Advarsel: UV-absorberende kontaktlinser kan IKKE erstatte UV-beskyttende briller eller UV-beskyttende solbriller, da de ikke fuldstændigt dækker øjet og det omgivende område. Du skal blive ved med at bruge UV-beskyttende briller, som anvist.

Bemærk: Langvarig eksponering til UV-stråling er en af de risikofaktorer, der er forbundet med katarakter. Eksponering baseres på flere forskellige faktorer, som f.eks. miljøforhold (højde, geografi, skydække) og personlige faktorer (omfanget og karakteren af udendørs aktiviteter). UV-blokerende kontaktlinser kan hjælpe med at beskytte mod skadelig UV-stråling.

Bemærk: Effekten af at anvende UV-absorberende kontaktlinser med henblik på at forhindre eller reducere forekomsten af øjenlidelser forbundet med eksponering til UV-lys er ikke blevet fastlagt. Der er ikke udført kliniske studier, der viser, at anvendelsen af UV-blokerende kontaktlinser kan reducere risikoen for at udvikle katarakter eller andre øjenlidelser. Kontakt din øjenspecialist for mere information.

Referencevejledning til symboler på mærkater og æsker



Betalt gebyr for affaldshåndtering i henhold til 94/62/EØF



Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609 USA



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames, KT2 6TN, UK

Udstedelsesdato: 2014-10-06



0050 Angiver mærkning for CE-overensstemmelse samt nummer på bemyndiget instans



Må ikke genbruges



Temperaturbegrænsning

*/™ angiver varemærker tilhørende Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated