



BRUKSANVISNING

Syftet med den här broschyrén är att informera användare av Bausch + Lomb (samfilcon A) hydrofila mjuka kontaktlinser om hur man bär och sköter sina linser.

Det gäller:

PRODUKTNAMN	MATERIAL	VATTENINNEHÅLL	LÖSNING I FÖRPACKNINGEN
Bausch + Lomb Ultra™ (samfilcon A) hanteringsfärgade kontaktlinser	samfilcon A	46% av vikten	Boratbuffrad koksaltlösning med poloxamin
Bausch + Lomb Ultra™ för astigmatism (samfilcon A) hanteringsfärgade kontaktlinser			
Bausch + Lomb Ultra™ för presbyopi (samfilcon A) hanteringsfärgade kontaktlinser			

Beskrivning och bruk


Dessa kontaktlinser är för dagligt bruk och ska bytas ut enligt det schema som fastställts av din optiker. Om du återanvänder linserna måste de rengöras, sköljas och desinfekteras mellan urtagning och återinsättning.

STERILE Linserna levereras sterila och är av tillverkaren avsedda för återanvändning enligt optikers rekommenderade schema. De har ångsteriliseras.

ANVÄND INTE produkten om förpackningen är skadad eller öppnad.

Anvisningar för insättning och uttagning

Innan du hanterar linserna, tvätta och torka alltid händerna ordentligt och undvik tvål med läkemedel eller parfym. Lägg linsen i handflatan. Se till att linsen är vänd åt rätt håll.

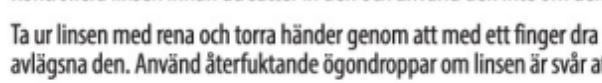

Kontrollera linsen innan du sätter in den och använd den inte om den är repad eller skadad.

Ta ur linsen med rena och torra händer genom att med ett finger dra ned linsen till ögonvitan och sedan avlägsna den. Använd återfuktande ögondroppar om linsen är svår att avlägsna.

Skötselanvisningar

- Bihåll friska ögon genom att rengöra och desinficera linserna mellan användning
- Använd endast linsvårdsprodukter för mjuka kontaktlinser enligt tillverkarens anvisningar
- Använd alltid linsvätskor som är nya och som inte har gått ut
- Använd inga andra lösningar så som kranvattnet eller vatten i flaska eller saliv för att skölja, förvara eller återfukta linserna
- Se till att linserna alltid ligger helt nedsänkta i rekommenderad lösning när de inte används
- Kom ihåg att rengöra linsetutet varje gång som du rengör dina linser
- Släng alltid bort linserna vid slutet av din optikers rekommenderade schema för användning
- Tvätta och skölj alltid händerna innan du hanterar linserna
- Låt ingen kosmetika, lotion, tvål, kräm eller parfymerat ämne komma in i ögat eller på linserna
- Använd aldrig vassa föremål eller naglar till att avlägsna linserna från sina behållare eller dina ögon

Varningar och försiktighetsåtgärder

Om du inte följer din optikers rekommenderade schema för användning och rengöring kan det leda till en större risk för allvarliga ögoninfektioner.

Använd inte kontaktlinser när du sover.

Använd inte kontaktlinser om du lider av:

- Allergi, inflammation, infektion eller rodnad i eller runt ögat
- Nedsatt hälsa som påverkar ögonen, t.ex. förkylning eller influensa
- En systemisk sjukdom som påverkar ögonen

Kontakta din optiker innan du använder kontaktlinser om du:

- lidar av torra ögon (otillräcklig mängd tårvätska)
- deltar i vattensporter
- vistas i extremt torra eller dammiga miljöer
- använder ögonläkemedel

Avlägsna dina linser omedelbart om något av följande problem uppstår:

- Det sticker, bränner, klar eller gör ont i ögonen eller ögonen känns irriterade
- Nedsatt komfort jämfört med tidigare användning
- Ovanlig utsöndring eller rikligt tårflöde från ögat
- Röda ögon
- Allvarligt eller ihållande torra ögon
- Nedsatt syn eller dimsyn
- Regnbågar eller ljusgloria runt ljus
- Ljuskänslighet

Om något av dessa symptom fortsätter efter att en lins tagits ut och en ny lins har satts in, avlägsna linsen och kontakta din optiker. Dessa symptom kan leda till mer allvarliga tillstånd om de ignoreras.

Referensguide för symboler, märken och förpackningar



Avgift betald för avfallshantering enligt 94/62/EG



Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA




Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames, KT2 6TN, UK

Datum för utfärdande: 2015-11-19



Anger CE-märkningen och det anmeldta organets nummer

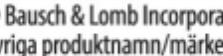

Temperaturbegränsning

*/™ betecknar varumärken som tillhör Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated.

Övriga produktnamn/märkesnamn är varumärken som tillhör respektive ägare.

8100401 / P9WW01 / 1502690

**BRUKSANVISNING**

Hensikten med denne brosjyren er å informere brukere av Bausch + Lomb (samfilcon A) hydrofile myke kontaktlinser om stell og bruk av linsene.

Dette gjelder:

PRODUKTNVN	MATERIALE	VANNINNHOLD	OPPLØSNING I PAKNING
Bausch + Lomb Ultra™ (samfilcon A) håndteringsfargede kontaktlinser	samfilcon A	46 % etter vekt	Boratbufret saltvann med poloxamin
Bausch + Lomb Ultra™ For astigmatisme (samfilcon A) håndteringsfargede kontaktlinser			
Bausch + Lomb Ultra™ For presbyopi (samfilcon A) håndteringsfargede kontaktlinser			

Beskrivelse og bruk

Disse linsene er utformet for daglig bruk, med en utskiftningsperiode som foreskrevet av optikeren. Når du bruker linsene på nyt, må de rengjøres, skylles og desinfiseres mellom fjerning og ny innsetting.

STERILE Linsene leveres sterile og er beregnet til gjenbruk i henhold til optikerens anbefaling.
Linsene er dampsterilisert.

IKKE BRUK linsense dersom emballasjen er skadet eller åpenet.

Instruksjer for innsetting og fjerning

Før du tar i linsene, skal du alltid vaske hendene og tørke grundig og unngå parfymerte eller medisinske såper. Legg linsen i håndflaten. Kontroller at linsen vender riktig vei.



Sjekk linsen før du setter den inn. Sett den ikke inn dersom den har riper eller er skadet.

Før du fjerner linsen skal du påse at hendene dine errene og tørre. Bruk fingeren til å skyve linsen ned til det hvite av øyet og ta den ut. Bruk fuktighetsgivende øyedråper dersom det er vanskelig å fjerne linsen.

Stell av linsene

- Det er viktig å rengjøre og desinfisere linsene når de ikke er i bruk for å holde øynene friske
- Bruk kun linsevæske som er beregnet til myke kontaktlinser i henhold til instruksene fra produsenten
- Bruk alltid nye linsevæske som ikke er utgått
- Bruk ikke andre væske som f.eks. vann fra springen eller flaskevann eller spitt til å skylle eller væte linsene på nyt
- Sørg for at linsene alltid ligger helt nedsenket i den anbefalte væsken når de ikke brukes
- Husk å rengjøre linseetuiet samtidig som du rengjør linsene
- Kast alltid linsene ved slutten av bruksperioden etter optikerens anbefaling
- Du må alltid vaske og skylle hendene før du tar i linsene
- La ikke kosmetiske produkter, kremer, såper eller parfymerte stoffer komme inn på øynene eller linsene
- Bruk aldri skarpe gjenstander eller neglene til å ta ut linsene fra beholderne eller øynene

Advarsler og forholdsregler

Dersom du ikke følger optikerens anbefalinger om bruksperiode og rengjøring, kan dette øke risikoen for alvorlige øyeinfeksjoner.

Unngå å ha linsene på når du sover.

Bruk ikke kontaktlinser dersom du har:

- øyeallergi, -betennelse eller -infeksjon, eller dersom du er rød på/rundt øynene
- sykdom som innvirker på øynene, f.eks. forkjølelse eller influensa
- systemiske sykdommer som innvirker på øynene

Kontakt optiker før du tar i bruk kontaktlinser når du

- har tørre øyne (lav tårevæskeproduksjon)
- driver vannsport
- oppholder deg i svært tørre eller støvfylte omgivelser
- bruker øyelegemidler

Dersom du opplever noen av følgende problemer, skal du straks fjerne linsene:

- svie, brennende følelse, kløe, irritasjon eller annet ubehag i øynene
- mindre komfort enn ved tidligere bruk
- unormal sekresjon eller rennende øyne
- røde øyne
- svært tørre øyne / konstant tørre øyne
- redusert eller uskarpt syn
- regnbuer eller glorie rundt lys
- lys følsomhet

Dersom noen av disse symptomene vedvarer etter at du har tatt ut en linse og satt inn en ny, skal du fjerne linsen og kontakte optiker. Symptomene kan føre til mer alvorlige tilstander dersom de ignoreres.

Referanseguide for symboler, etiketter og esker

Avgift for avfallshåndtering i henhold til 94/62/EF




Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA




Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Dato utstedt: 2015-11-19

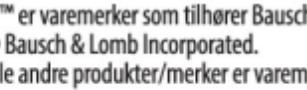

Indikerer CE-konformitet og nummer på informert instans

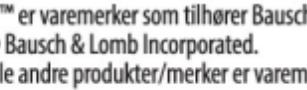

Temperaturbegrensning

®/™ er varemerker som tilhører Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated.

Alle andre produkter/merker er varemerker som tilhører de respektive eierne.

8100401 / P9WW01 / 1502690



BRUGSANVISNING

Formålet med denne brochure er at informere brugere af Bausch + Lomb (samfilcon A) hydrofile, bløde kontaktlinser om, hvordan de skal bruge og pleje deres linser.

Den gælder for:

PRODUKTNVN	MATERIALE	VANDINDHOLD	PAKKENS VÆSKE
Bausch + Lomb Ultra™ håndteringsfarvede kontaktlinser (samfilcon A)	samfilcon A	46 % efter vægt	Boratbufferet saltopløsning med poloxamin
Bausch + Lomb Ultra™ håndteringsfarvede kontaktlinser til astigmatisme (samfilcon A)			
Bausch + Lomb Ultra™ håndteringsfarvede kontaktlinser til presbyopi (samfilcon A)			

Beskrivelse og anvendelse


Disse linser er beregnet til daglig brug med en udskiftningsperiode som foreskrevet af øjenspecialisten. Hvis du tager linserne ud inden for denne periode, skal de renses, skyldes og desinficeres, før du bruger dem igen.

STERILE Disse linser leveres sterile og er fra producentens side beregnet til genanvendelse som foreskrevet af øjenspecialisten. Linserne er dampsteriliserede.

Anvend IKKE pakken, hvis den er åbnet eller beskadiget.

Instruktioner om isætning og udtagning

Før linserne håndteres, skal du altid vaske og tørre hænderne grundigt og undgå sæber med parfume eller medicin. Hæld linsen ned i din håndflade. Kontroller, at linsen har den rigtige side ud.

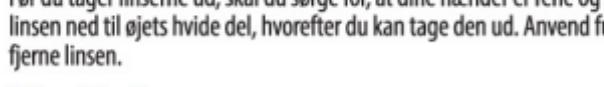

Kontroller linsen, før du sætter den i, og sæt den ikke i, hvis den er ridset eller beskadiget.

Før du tager linserne ud, skal du sørge for, at dine hænder er rene og tørre. Brug fingeren til at skubbe linsen ned til øjets hvide del, hvorefter du kan tage den ud. Anvend fugtdråber, hvis det er vanskeligt at fjerne linsen.

Pleje af dine linser

- Det er vigtigt for dine øjnes sundhed, at du rensrer og desinficerer dine linser mellem hver anvendelse
- Brug kun plejeprodukter til bløde kontaktlinser i henhold til producentens anvisninger
- Brug altid frisk linseplejevæske, hvor udløbsdatoen ikke er overskredet
- Undlad at bruge andre væsker såsom vand fra vandhanne eller flaske eller spyt til at skylle, opbevare eller fugte linserne igen
- Hold altid linserne fuldstændig dækket af den anbefalede væske, når de ikke er i brug
- Husk at rense linsebeholderen, hver gang du rensrer dine linser
- Kasser linserne i henhold til den plan, du har fået af din øjenspecialist
- Husk at vaske hænder og skylle dem, før du håndterer dine linser
- Der må ikke komme kosmetik, lotion, sæbe, creme eller parfumerede stoffer i øjnene eller på linserne
- Du må aldrig anvende skarpe genstande eller fingernegle til at fjerne linserne fra beholderen eller fra øjnene

Forholdsregler og advarsler

Hvis du ikke følger planen over anbefalet brug og rensning fra din øjenspecialist, kan du risikere alvorlige øjeninfektioner.

Bær ikke linser når du sover

Anvend ikke kontaktlinser, hvis du lider af følgende:

- Allergi, betændelse, infektion eller rødme i eller omkring øjnene
- Dårligt helbred, der påvirker øjnene (f.eks. forkølelse og influenza)
- Enhver systemisk lidelse, der påvirker øjnene

Kontakt din øjenspecialist i følgende tilfælde, før du begynder at bruge kontaktlinser hvis du:

- lider af tørre øjne (utilstrækkelig tårevæske)
- Dyrker vandsport
- Opholder dig i meget tørre eller støvede omgivelser
- Bruger øjenmedicin

Hvis du oplever et af følgende problemer, skal du omgående tage din lins ud:

- Hvis øjnene prikker, brænder, klør eller er irriterede, eller hvis du har andre øjensmerter
- Hvis du har nedsat komfort i sammenligning med almindelig brug
- Hvis der kommer usædvanligt sekret eller meget vand ud af øjnene
- Hvis øjnene er røde
- Hvis øjnene er meget tørre eller er tørre hele tiden
- Hvis du oplever reduceret eller sløret syn
- Hvis du oplever regnbuer eller haloer omkring lys
- Hvis du bliver følsom over for lys

Hvis et af disse symptomer fortsætter, efter du har fjernet de gamle linser og sat nye i, skal du fjerne linserne og kontakte din øjenspecialist. Disse symptomer kan føre til mere alvorlige tilstande, hvis de ignoreres.

Referencevejledning til symboler på mærkater og æske



Betalt gebyr for affaldshåndtering i henhold til 94/62/EØF



Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA

EC REP

Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames, KT2 6TN, UK

Købsdato: 2015-11-19



CE 0050

Angiver mærkning for CE-overensstemmelse samt nummer på bemyndiget instans

Temperaturbegrensning

/ angiver varemærker tilhørende Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated.

Andre produkt-/brand-navne er varemærker, der tilhører de pågældende ejere.

8100401 / P9WW01 / 1502690

**KÄYTTÖOHJEET**

Tässä esitteessä kerrotaan, miten Bausch + Lombin (samfilcon A) hydrofilisiä pehmeitä piilolinsejä käytetään ja hoidetaan.

Ohjeet koskevat seuraavia tuotteita:

TUOTTEEN NIMI	MATERIAALI	VESIPITOISUUS	PAKKAUSLIUOS
Bausch + Lomb Ultra™ (samfilcon A) käsittelyvärjättyt piilolinssit	samfilcon A	46 % painosta	Boraattipuskuroitu suolaliuos, jossa on poloksamiinia
Bausch + Lomb Ultra™ (samfilcon A) käsittelyvärjättyt piilolinssit hajataittoisuuteen			
Bausch + Lomb Ultra™ (samfilcon A) käsittelyvärjättyt piilolinssit ikänäköön			

Kuvaus ja käyttö

Nämä linssit on tarkoitettu päiväkäyttöön ja ne tulee vaihtaa uusiin optikon tai silmälääkärin ohjeiden mukaisesti. Kun linssejä käytetään uudelleen, ne pitää poistamisen jälkeen puhdistaa, huuhdella ja desinfioida ennen kuin ne laitetaan takaisin silmiin.




Nämä linssit toimitetaan steriileinä, ja niiden valmistaja on tarkoittanut ne uudelleenkäytettäväksi optikon tai silmälääkärin ohjeiden mukaisesti. Ne on höyrysteriloitu.

El SAA KÄYTÄÄ, jos pakaus on avattu tai rikkinaiseen.

Asettamis- ja poisto-ohjeet

Pese ja kuivaa kädet aina perusteellisesti ennen linssien käsittelemistä. Vältä hajustettuja saippuoita ja lääkesaippuoita. Kumoa linssi kämmenellesi. Varmista, että linssi on oikein päin.

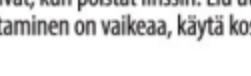

Tarkista linssi ennen silmään laittamista, äläkä laita sitä, jos siinä on naarmuja tai vaurioita.

Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat, kun poistat linssin. Liu'uta linssi sormellasi alas silmänvalkuaisen kohdalle ja poista linssi. Jos linssin poistaminen on vaikeaa, käytä kostutustippoa.

Linssien hoito

- Linssien puhdistus ja desinfiointi käyttökertojen välillä on tärkeää silmien terveydelle.
- Käytä vain pehmeiden piilolinssien hoitotuotteita valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä linssien hoitoon aina uutta hoitonestettä, jonka pääväys on voimassa.
- Älä käytä linssien huuhteluun, säilytykseen tai kostutukseen mitään muuta nestettä, kuten hana- tai pullovertä tai sylkeä.
- Kun linssit eivät ole käytössä, säilytä ne aina suositellussa hoitonesteessä kokonaan nesteen peitossa.
- Muista puhdistaa linssikotelosi aina, kun puhdistat linssisi.
- Hävitä linssit aina optikon tai silmälääkärin määräämän käyttöjakson jälkeen.
- Pese ja huuhtele kädet aina ennen linssien käsittelemistä.
- Kosmetiikkatuotteita, voiteita, saippuaa, rasvoja tai hajustettuja aineita ei saa joutua silmiin tai linsseihin.
- Älä koskaan käytä teräviä esineitä tai kynsiä poistaessasi linssejä kotelosta tai silmistä.

Varoitukset ja varotoimet

Ellei silmälääkärin suosittelemia pitoaikoja ja puhdistusmenetelmiä noudateta, vakavan silmätulehduksen riski voi suurentua.

Älä käytä linssejä nukkuessasi

Älä käytä piilolinsejä, jos sinulla on jotakin seuraavista:

- Jokin allergia, tulehdus, infektio tai punoitusta silmässä tai sen ympäällä
- Jokin silmiin vaikuttava vaiva, esim. vilustuminen tai flunssa
- Koko elimistöön vaikuttava sairaus, joka vaikuttaa myös silmiin

Kysy optikoltasi tai silmälääkärltäsi neuvoa ennen kuin käytät piilolinsejä seuraavissa tilanteissa:

- Kuivasilmäisyys (kyynelnesteen vähyyys)
- Vesurheilu
- Erityisen kuiva tai pölyinen ympäristö
- Silmälääkkeiden käyttö

Ota linssit heti pois, jos sinulla on jokin seuraavista ongelmista:

- Silmien kirvelly, polte, kutina, ärsytys tai muu kipu silmässä
- Käyttö epämukavampaa kuin edellisellä kerralla
- Epätavallinen eritys silmästä tai runsas kyynelnesteen eritys
- Silmien punoitus
- Vaikea tai pitkäkestoinen kuivasilmäisyys
- Heikentynyt tai sumentunut näkö
- Sateenkaaren värejä tai valokehiä valojen ympäällä
- Valoherkkyys

Jos mikä tahansa näistäoireista jatkuu sen jälkeen, kun olet poistanut linssin ja laittanut uuden, poista linssi ja ota yhteys silmälääkäriin. Nämä oireet voivat johtaa vakavampiin seurauksiin, jos ne jäätetään huomiotta.

Etikettien ja pakauksien symbolit

Direktiivin 94/62/EY mukainen pakausjättemaksu maksettu




Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Julkaisupäivämäärä: 2015-11-19

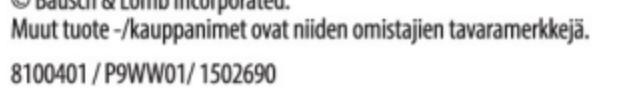

Lämpötilarajoitus

®/™ viittaa Bausch & Lomb Incorporated-yhtiön tavaramerkkeihin.

© Bausch & Lomb Incorporated.

Muut tuote-/kauppanimet ovat niiden omistajien tavaramerkkejä.

8100401 / P9WW01 / 1502690



NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Þessi bæklingur er til að upplýsa þá sem nota Bausch + Lomb (samfilcon A) vatnssæknar, mjúkar snertilinsur um hvernig á að nota linsurnar og meðhöndla þær.

Upplýsingarnar eiga við um:

VÖRUHEITI	EFNI	VATNSINNIGHALD	LAUSN I UMBÚDUM
Bausch + Lomb Ultra™ (samfilcon A) sýnilegar, litaðar snertilinsur	samfilcon A	46% miðað við þyngd	Bóratstilt saltlausn með póloxamíni
Bausch + Lomb Ultra™ við sjónskekkju (samfilcon A) sýnilegar, litaðar snertilinsur			
Bausch + Lomb Ultra™ við ellifjarsýni (samfilcon A) sýnilegar, litaðar snertilinsur			

Nánari lýsing og notkun


Þessar linsur eru ætlaðar til daglegrar notkunar og þeim skal skipt út samkvæmt leiðbeiningum augnlæknis. Ef nota á linsurnar aftur þarf að hreinsa og sótthreinsa þær milli þess sem þær eru teknar úr og notaðar aftur.

STERILE Þessar linsur eru sótthreinsaðar af framleiðanda til endurnotkunar eins og augnlæknir mælir fyrir um. Linsurnar eru gufusæfðar.

NOTÍÐ EKKI ef umbúðirnar eru skemmdar eða opnaðar.

Leiðbeiningar varðandi ísetningu og losun

Áður en augnlinsur eru meðhöndlaðar skal þvífa og þurrka hendur vandlega og forðast sápur með ilmefnum eða lyfjablandaðar sápur. Hellið linsunni í löfann. Gætið þess að linsan snúi rétt.

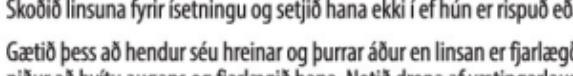

Skoðið linsuna fyrir ísetningu og setjið hana ekki í ef hún er rispuð eða skemmd.

Gætið þess að hendur séu hreinar og þurrar áður en linsan er fjarlægð, notið síðan fingur til að renna linsunni niður að hvítu augans og fjarlægið hana. Notið dropa af vætingarlausn ef það er erfitt að fjarlægja linsuna.

Umhirða augnlinsa

- það er mikilvægt fyrir heilbrigði augnanna að hreinsa og sótthreinsa linsurnar milli þess sem þær eru notaðar.
- Notið aðeins hreinsiefni fyrir mjúkar snertilinsur og farið eftir leiðbeiningum framleiðanda.
- Notið alltaf ferskan linsuvökva sem er ekki útrunninn.
- Notið ekki önnur efni eins og kranavatn, vatn úr flösku eða munnvatn til að hreinsa, geyma eða væta linsurnar.
- Geymið linsurnar alltaf alveg á kafi í þeim linsuvökva sem mælt er með þegar þær eru ekki í notkun.
- Munið að hreinsa linsuhylkið þegar linsurnar eru hreinsaðar.
- Fargið alltaf linsum að loknu notkunartímabilinu sem augnlæknirinn mælti fyrir um.
- Ávallt skal þvo og hreinsa hendur áður en augnlinsur eru meðhöndlaðar.
- EKKI láta snyrtivörur, áburði, sápur, krem eða ilmefni komast í augu né á augnlinsurnar.
- Notið aldrei oddhvassa hluti né neglur til að taka linsur úr flátum eða augum.

Varnaðorð og varúðarreglur

Ef rálöögum notkunarleiðbeiningum og þrifáætlun frá augnlæknin er ekki fylgt getur slikt aukið hættuna á alvarlegum augnsýkingum.

EKKI má sofa með linsurna

EKKI nota augnlinsur ef þú ert með eftirfarandi:

- Ofnæmi, bólgu, sýkingu eða roða í auganu eða kringum augað
- Slæma heilsu sem hefur áhrif á augun, t.d. kvef og flensu
- Almenna kvilla sem hafa áhrif á augun

Hafið samband við augnlæknin áður en augnlinsur eru notaðar í eftirfarandi tilvikum:

- Þurr augu (ónógan tárvökva)
- Í vatnsíþróttum
- Í mjög þurru eða rykugu umhverfi
- Samhlíða augnlyfjum

Fjarlægið augnlinsurnar umsvifalaust ef vart verður við eftirfarandi:

- Sting, sviða, kláða, ertingu í augum eða annan verk í augum
- Óþægindi við notkun í samanburði við fyrri notkun
- Óeðlilega seytingu eða mikla vökvamyndun í auganu
- Roða í augum
- Alvarlegan eða þrálátan þurk í augum
- Skerta sjón eða þokusýn
- Regnboga eða ljósbauga umhverfis ljós
- Ljósnaði

Ef einhver þessara einkenna halda áfram eftir að augnlinsur eru teknar úr og nýjar augnlinsur eru settar í, skal hafa samband við augnlæknin. Þessi einkenni geta leitt til alvarlegri kvilla ef ekki er hugað að þeim.

Leiðarvísir fyrir tákni, merkimiða og öskjur



Gjöld greidd fyrir meðhöndlun úrgangs samkvæmt 94/62/EB



Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Útgáfudagur: 2015-11-19



Tilgreinir CE-samræmismerknið og númer tilkynntis aðila



Hitatakmarkanir